

ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТУЛУБА АБО ВСЬОГО ТІЛА

Подушки протипролежневі з пінополіуретану



1



2

						Особливості конструкції	Модель/Виробник
ОД.1.11-4-0-3-1-1							
1	70	400-500	370-500	100	1,2	З в'язкоеластичного пінополіуретану з ефектом пам'яті; без наповнювача; для пом'якшення здавлювання; плоска; одношарова	ALM.ПП-01 ХМУВП «ВОЛЯ» ХОФ «Соціальний захист»
ОД.1.11-4-1-3-2-2							
2	70	400-500	370-500	100	1,3	З в'язкоеластичного пінополіуретану з ефектом пам'яті; наповнювач другого шару - пінополіуретан; для пом'якшення здавлювання; профільована; двошарова	ALM.ПП-05 ХМУВП «ВОЛЯ» ХОФ «Соціальний захист»

Технічні характеристики та оснащення моделі


Подушка протипролежнева складається з тканевого знімного чохла та з в'язко - еластичного поліуретанового блоку з ефектом пам'яті
Має додатковий пінополіуретановий блок

Опис конструкції

- 1** - Подушка протипролежнева ALM.ПП-01 складається з основи із пінополіуретану, що розташована у оболонці з водонепроникного матеріалу. Основа у оболонці з водонепроникного матеріалу поміщається у чохол із застібною-блискавкою. Нижня частина чохла виконана з прорезиненої тканини, що допомагає фіксуванню подушки у колісному кріслі.
Має 7 типорозмірів.
- 2** - Подушка протипролежнева ALM.ПП-05 складається з основи із пінополіуретану та пінополіуретанової вкладки, що кріпиться до основи за допомогою стрічки велкро, які поміщені у чохол із застібною-блискавкою. Нижня частина чохла виконана з прорезиненої тканини та має стрічку велкро, що допомагає фіксуванню подушки у колісному кріслі.
Має 7 типорозмірів.

Подушки протипролежневі з пінополіуретану

(продовження)

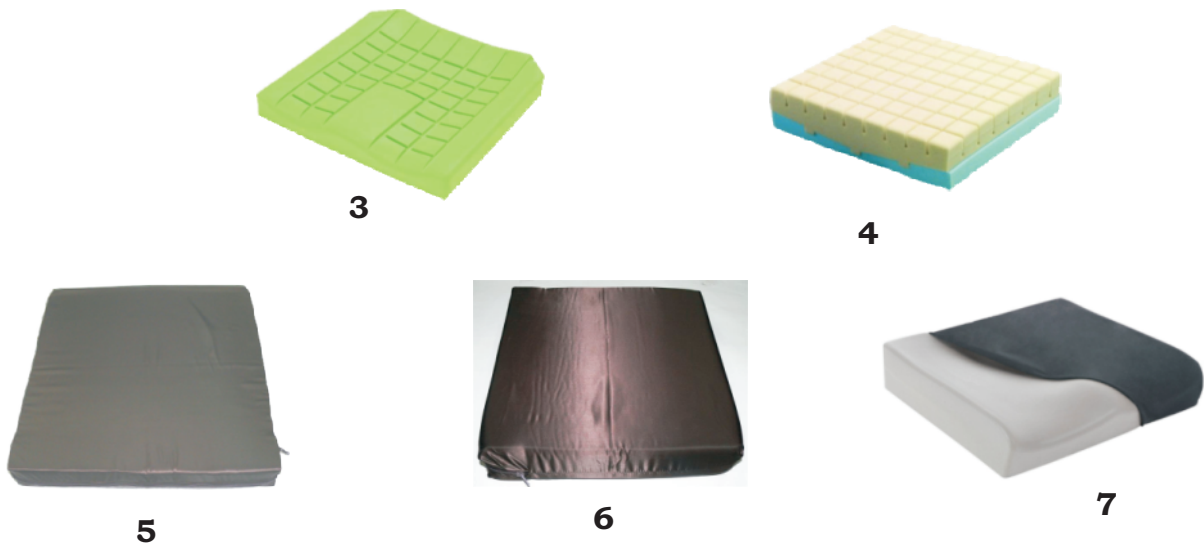

    						Особливості конструкції	Модель/Виробник
ОД.1.11-2-0-3-2-1							
3	78	250-510	250-510	125	1,0	З в'язкоеластичного пінополіуретану; без наповнювача; для пом'якшення здавлювання; профільована; одношарова	Flo-tech Lite ТОВ "Ваше Здоров'я Трейдинг"
ОД.1.11-1-1-3-1-2							
4	100	250-510	250-510	125	1,0	З пінополіуретану; наповнювач другого шару - пінополіуретан; для пом'якшення здавлювання; плоска; двошарова	Propad Premier ТОВ "Ваше Здоров'я Трейдинг"
ОД.1.11-4-0-3-1-1							
5	60	420	420	100	1,0	З в'язкоеластичного пінополіуретану з ефектом пам'яті; без наповнювача; для пом'якшення здавлювання; плоска; одношарова	ПП-I АТ «Ортодопомога»
ОД.1.11-4-0-3-1-2							
6	80	420	420	100	1,2	З в'язкоеластичного пінополіуретану з ефектом пам'яті; без наповнювача; для пом'якшення здавлювання; плоска; двошарова	ПП-II АТ «Ортодопомога»
ОД.1.11-2-0-3-2-1							
7	100	355-505	355-505	125	0,82	З в'язкоеластичного пінополіуретану; без наповнювача; для пом'якшення здавлювання; профільована; одношарова	TERRA ТОВ «Світ літньої Людини та Реабілітації»

Подушки протипролежневі з пінополіуретану

(продовження)

Опис конструкції

3 - Подушка протипролежнева Flo-tech Lite з низьким профілем має спінену компакту підстава з низьким профілем, виконану з вискоеластичного литого матеріалу, який забезпечує ефективне зниження сили тиску і збільшення терміну служби.

Має 61 типорозмір.

4 - Подушка Propad Premier складана з двох частин - більш жорсткої основи і верхнього профільованого поліуретанового шару. Рухливі осередки профілю забезпечують стабілізування користувача і рівномірний розподіл тиску.

Має 61 типорозмір.

5, 6 - Подушка протипролежнева складається з тканевого знімного чохла та з в'язко-еластичного поліуретанового блоку з ефектом пам'яті.

ПП-I - подушка протипролежнева одношарова.

ПП-II - подушка протипролежнева двошарова.

Має додатковий пінополіуретановий блок.

7 - Подушка протипролежнева TERRA складається з спіненої компактної підстави з низьким профілем, яка виконана з вискоеластичного литого матеріалу, який забезпечує ефективне зниження сили тиску.

Має 16 типорозмірів.

Габаритні розміри, мм:

Довжина - 355, 405, 505

Ширина - 355, 380, 405, 430, 455, 505