


СТІЙКИ (ВЕРТИКАЛІЗАТОРИ - СТІЙКИ ПОХИЛІ)



1 - 2

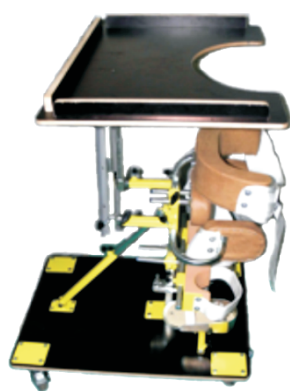

3



4

	Н	L	В			Особливості конструкції	Модель/ Виробник
МО.1.1.2.3-1-2-2-1Д							
1	850	855	620	40	16,5	Складана. Стільниця, спинка підлокітники регулюються за висотою та кутом нахилу. Глибина сидіння не регулюється. Має валик для збереження зазору між ногами.	АНТ 401 ТОВ НВЦ “Антеї ЛТД”
2	1080	1145	670	60	24,0		АНТ 402 ТОВ НВЦ “Антеї ЛТД”
МО.1.1.2.3-2-2-2-1Д							
3	1000	890	620	40	22,0	Нескладана. Стійка та стільниця регулюються за висотою та кутом нахилу.	ВД Львівське КЕПЗПіП
4	830	850	670	50	19,8	Нескладана. Стільниця регулюється за кутом нахилу; вся система опори для тулуба та абдуктор - за висотою.	ОСПВ ТОВ «Ортотехно»

Додаткова інформація:
Моделі розраховані на зріст користувача:
АНТ 401 - до 110 см, АНТ 402 - від 110 до 150 см

Опис конструкції

Стійки (вертикалізатори - стійки похилі) складаються з рами зі сталі або деревини, чотирьох коліс з запобіжними гальмами (або без коліс), опори для ніг з фіксаторами або без них, стільниці та елементів фіксування тулуба чи колін. Кут нахилу регулюється вручну або за допомогою приводу.

СТІЙКИ (ВЕРТИКАЛІЗАТОРИ - СТІЙКИ ПОХИЛІ)

продовження

5



6



7



8

Опис конструкції

Стійки (вертикалізатори - стійки похилі) складаються з рами зі сталі або деревини, чотирьох коліс з запобіжними гальмами (або без коліс), опори для ніг з фіксаторами або без них, стільниці та елементів фіксування тулуба чи колін. Кут нахилу регулюється вручну або за допомогою приводу.

Додаткова інформація:

Модель АНТ 403 розраховані на зріст користувача - від 110 до 150 см.

	Н	L	В			Особливості конструкції	Модель/ Виробник
МО.1.1.2.3-1-2-2-1Д							
5	640-915	900-1265	675	60	20,0	Складана. Висота, кут нахилу стільниці регулюються, глибина сидіння не регулюється.	АНТ 403 ТОВ НВЦ "Антей ЛТД"
6	980-1400	780-1230	570	50	24,0	Складана. Висота, кут нахилу стільниці регулюються, глибина сидіння не регулюється.	ВО-1 ПОГ "Інватех"
7	1300-1850	800-1950	650	60	36,5	Складана. Висота, кут нахилу стільниці регулюються, глибина сидіння не регулюється.	ВО-2 ПОГ "Інватех"
8	800-1200	800-1200	580	40	18,0	Складана. Висота, кут нахилу стільниці регулюються, глибина сидіння не регулюється. Система опори для тулуба регулюється за висотою; абдуктор - за висотою та глибиною.	СПд-1 ПОГ "Інватех"